

## Bitne karakteristike:

- ✓ Mali i lagan
- ✓ Osetljiv – detektuje do 1-og femtomola ATP-a.
- ✓ Ima mogućnost uspostave 256 linija kontrole
- ✓ Na svakoj liniji kontrole ima u memoriji mesta za 2000 lokacija uzimanja brisa
- ✓ Alfanumeričko ( sa rečima) označavanje lokacija uzimanja uzorka
- ✓ Čuva 10000 rezultata
- ✓ Veoma lak za rukovanje
- ✓ Rezultati se dobijaju za 10 sekundi
- ✓ Kod uključjenja se sam kalibrira ( podešava )
- ✓ Rad sa 4x AA baterijama
- ✓ Vezivanje sa USB ili Bluetooth adapterom na kompjuter za prebacivanje rezultata
- ✓ Uključen je program za obradu podataka za kompjuter
- ✓ Uključena je torbica za instrument, stalak, i vrpca za nošenje



ARP brisevi je komplet za uzimanje briseva i kontrolu higijene radnih površin. Rezultati se očitavaju sa Firefly™ ATP Luminometrom. Test sadrži stabilni enzim u tečnosti koji omogućavaju preciznost i reproduktivnost rezultata.

- Rok trajanja 12 meseci
- Otporni na temperaturna kolebanja




## Firefly™ Luminometer i ATP brisevi

Određivanje ostataka organskih materija (ATP) na bazi bioluminescencije

- Upotreba u HACCP sistemu
- Kontrola higijene površina i tečnosti
- Brz i siguran rezultat kontrole higijene
- Čuvanje i obrada rezultata u kompjuterskom programu
- Praćenje rezultata
- Optimalizacija procesa čišćenja
- Ušteda vremena i novca

### Brzo i jednostavno – Rezultat za 10 sekundi

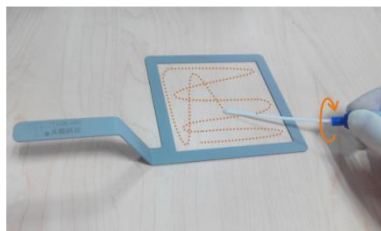


1. Bris površine 10x10 cm



2. Vstavljanje brisa



3. Aktivacija brisa

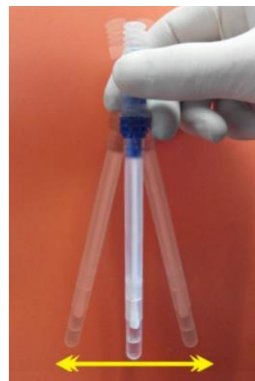

4. Mešanje 5 s brisa



5. Rezultat